

TC12

series



產品分類

• 醫療應用

TC12是專為醫療用吊架系統而設計的聰明控制盒，它能搭配相關的推桿和控制器，協助護理人員安全地移動動作不便的病患。





產品特色

可連接的馬達	1~3
最大輸出	24VDC · 10A
防水等級	IP66
備用電池	可抽換式電池包
其它選項	液晶螢幕、LED電量顯示
安規認證	IEC60601-1, ES60601-1, IEC60601-1-2
工作溫度範圍	+5°C~+45°C
插牆式充電器-TBC2 (註：充電座為選配)	
具備定期維護 / 過載警示提醒通知	
緊急按鈕裝置	
易於安裝	

工程圖

標準尺寸
(mm)

電池包
24V DC / 2.9Ah

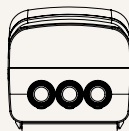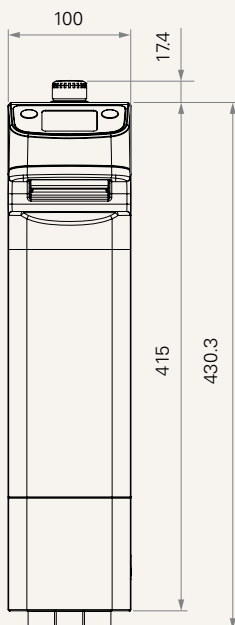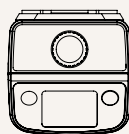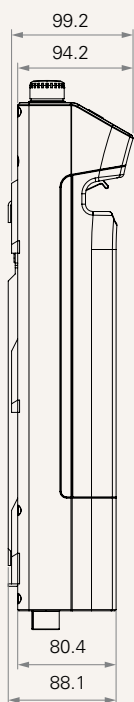


電池包
24V DC / 5.0Ah




運行狀態

控制吊架的腳部開 / 關、上 / 下移動

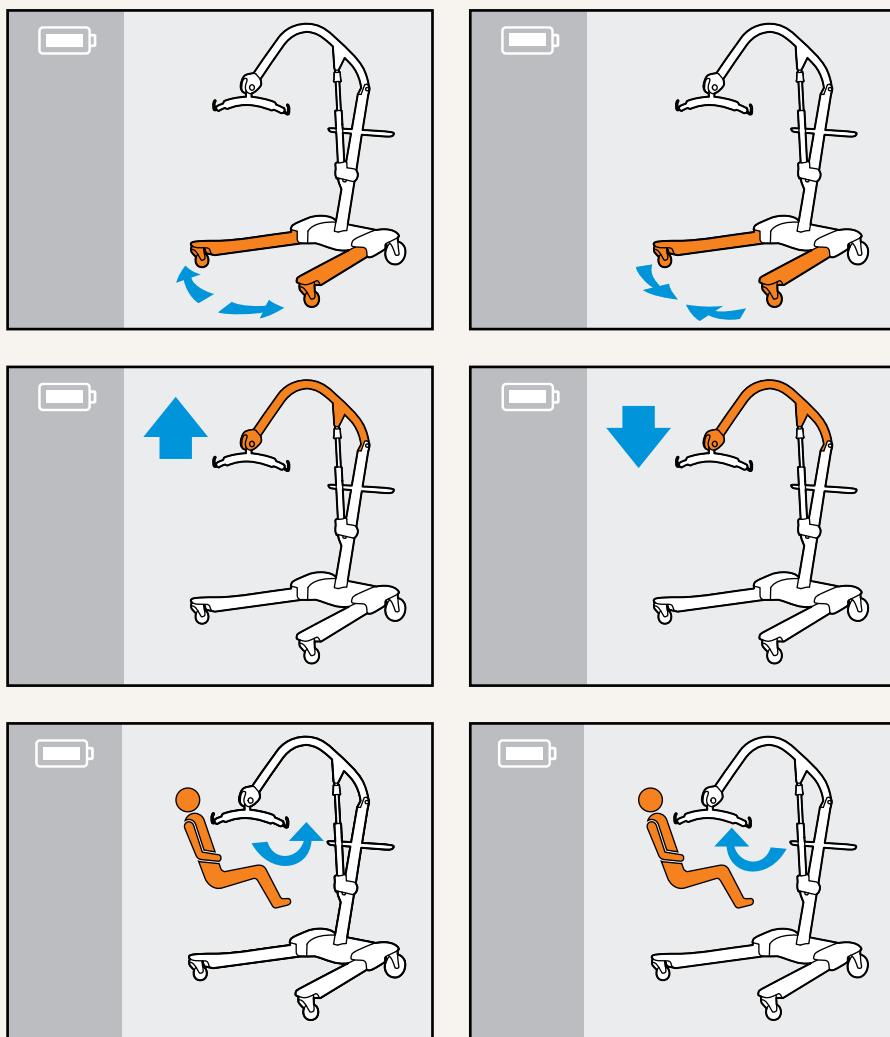


警示通知

警告提醒低電量、超載和安全開關

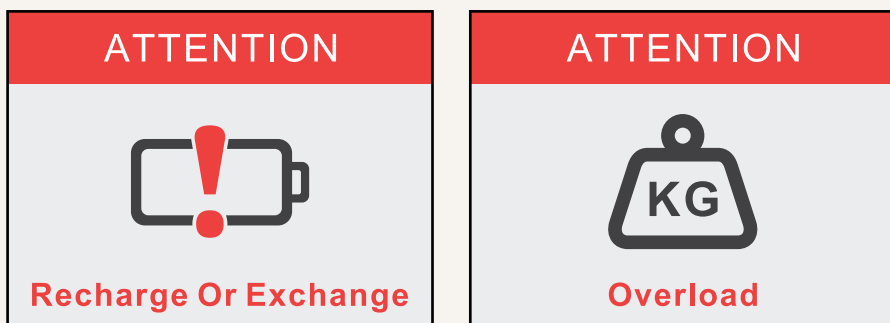


電池狀態

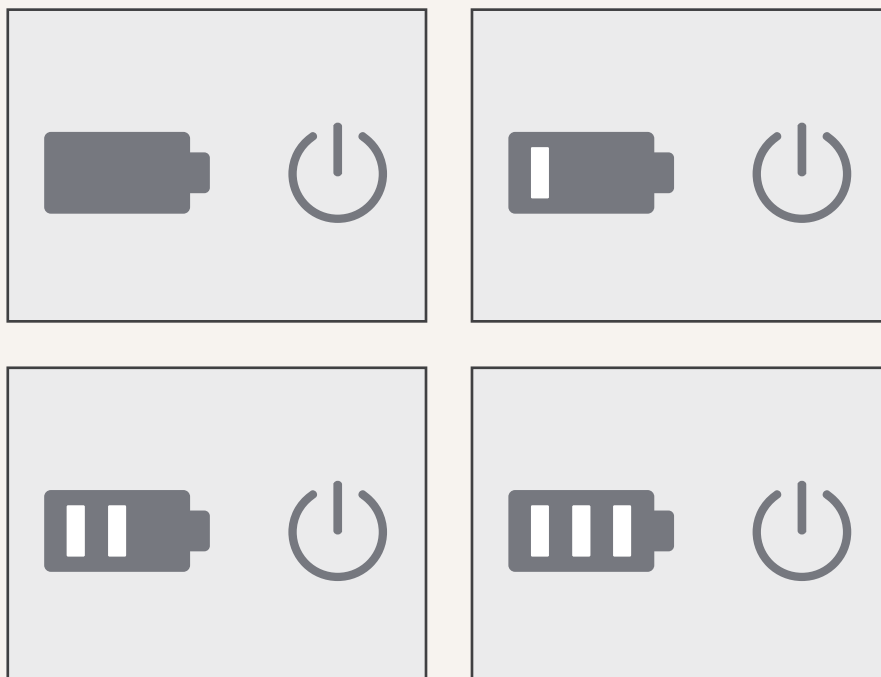


安裝指南


1. 在吊架上安裝固定板

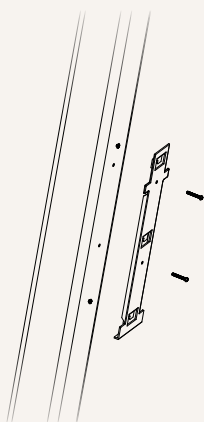


2. 在固定板上安裝TC12

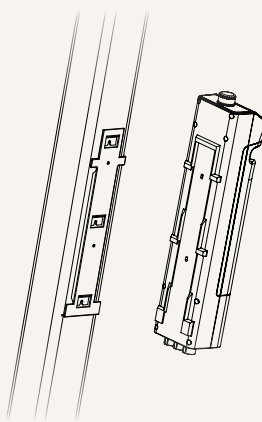


3. 確保所有螺絲固定

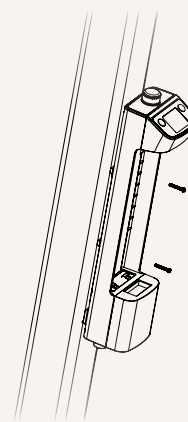

4. 安裝電池

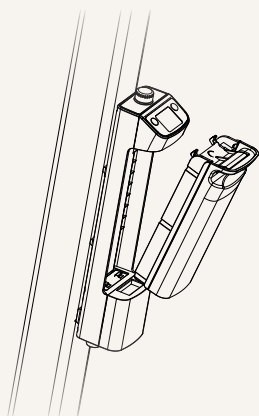

5. 安裝完成

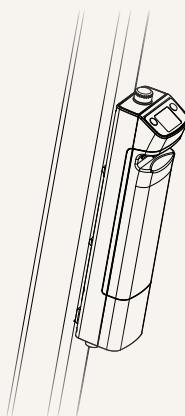

產品搭配方案


控制盒：TC12

控制器：TH10或TMH3

線性推桿 (吊架上 / 下調整)：TA12、TA23或TA36

線性推桿 (腳部開 / 關、吊架角度調整)：TA16或TA23

配件：插牆式充電器 - TBC2 (必選)、充電座* (選配)

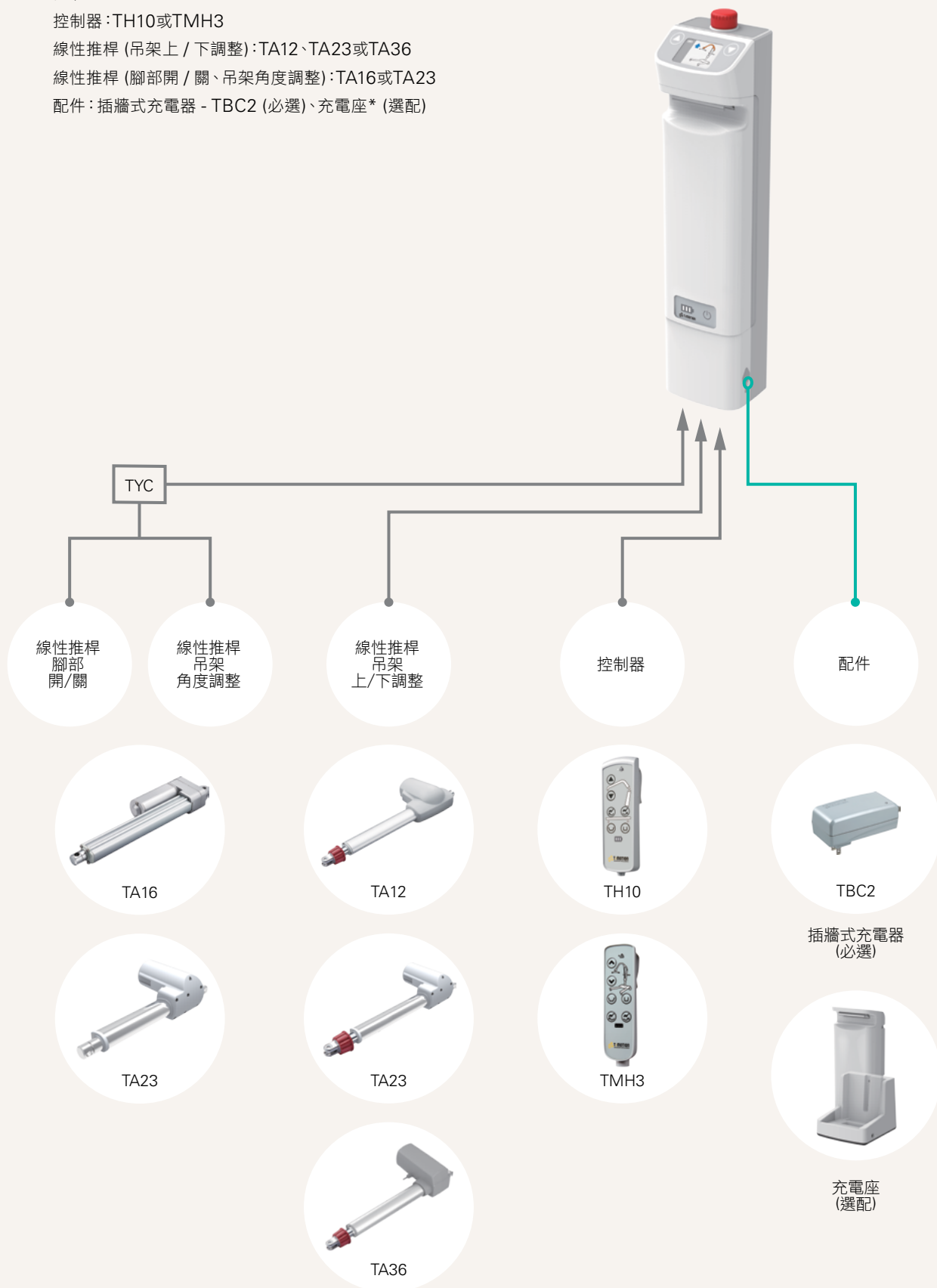

備註

1 TBC2 的其中一個選配為充電座，可讓TC12上的可拆式電池包獨立充電。

電池包 參照頁8	3 = 24V DC / 2.9Ah + LED電量顯示		9 = 4.5Ah (鋰電池；需要使用危險包裝) + LED電量顯示
	4 = 24V DC / 5.0Ah + LED電量顯示		B = 10Ah (鋰電池；需要使用危險包裝) + LED電量顯示
	8 = 2.5Ah (鋰電池) + LED電量顯示		
推桿接口	1 = 1	2 = 2	3 = 3
顏色	1 = 標準 (上蓋：淺灰1C；下蓋：深灰5C)		
顯示螢幕	1 = 黑白螢幕，2按鍵		5 = 無螢幕，4按鍵，LED電量顯示
	2 = 彩色螢幕，2按鍵		6 = 無螢幕，4按鍵
	3 = 無螢幕，無按鍵		8 = 無螢幕，2按鍵，LED電量顯示
	4 = 無螢幕，2按鍵		
IP等級	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66

TC12

Version: 20230925-P

電池包 參照頁8	3 = 24V DC / 2.9Ah + LED電量顯示		9 = 4.5Ah (鋰電池；需要使用危險包裝) + LED電量顯示
	4 = 24V DC / 5.0Ah + LED電量顯示		B = 10Ah (鋰電池；需要使用危險包裝) + LED電量顯示
	8 = 2.5Ah (鋰電池) + LED電量顯示		
推桿接口	1 = 1	2 = 2	
顏色	1 = 標準 (上蓋：淺灰1C；下蓋：深灰5C)		
顯示螢幕	0 = 無螢幕，無按鍵 (無MCU)		7 = 無螢幕，2按鍵 (無MCU)
IP等級	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66

電池包



3 = 24V DC / 2.9Ah + LED電量顯示

8 = 2.5Ah (鋰電池) + LED電量顯示

9 = 4.5Ah (鋰電池；需要使用危險包裝) + LED電量顯示

B = 10Ah (鋰電池；需要使用危險包裝) + LED電量顯示

4 = 24V DC / 5.0Ah + LED電量顯示

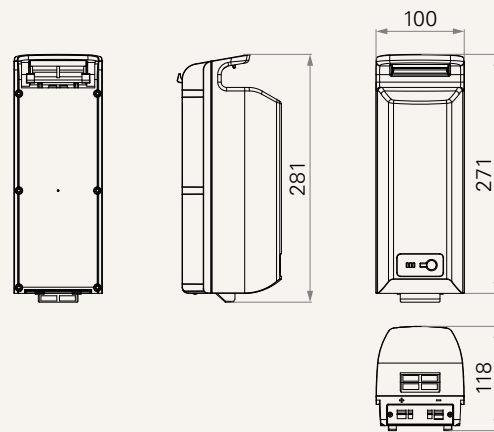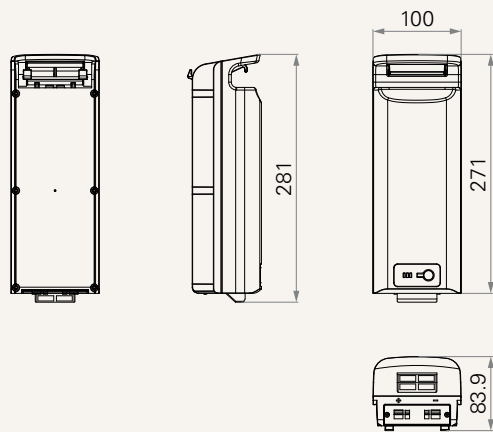

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。

然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。

堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。